

Asystent Auracast



Dostęp do dźwięku z Asystentem Auracast

Bądź zawsze w kontakcie dzięki Auracast™! Odkrywaj dostępne transmisje i dołączaj do nich jednym dotknięciem. Na lotnisku, w klubie fitness, podczas wydarzeń publicznych czy przy odsłuchiwaniu ważnych komunikatów – wyraźny dźwięk trafia bezpośrednio do Twoich aparatów słuchowych za pośrednictwem aplikacji My Starkey, zapewniając wygodę i lepsze zrozumienie mowy w każdej sytuacji.

OMEGA^{AI}
EDGE^{AI}



Gdzie to znaleźć



**Moja aplikacja mobilna
MyStarkey***

*Wymagana wersja oprogramowania sprzętowego
aparatu słuchowego 10.3.1.5 lub nowsza.

Jak połączyć się z transmisjami Auracast™ w aplikacji My Starkey

1. Na ekranie głównym naciśnij: **Opcje strumieniowania**. ((••)) .
2. Naciśnij **transmisje Auracast™**.
3. Stuknij transmisję, do której chcesz dołączyć.
4. Odbieraj dźwięk płynnie i bez zakłóceń bezpośrednio w kompatybilnych aparatach słuchowych Starkey.

Zeskanuj, aby sprawdzić zgodność urządzenia

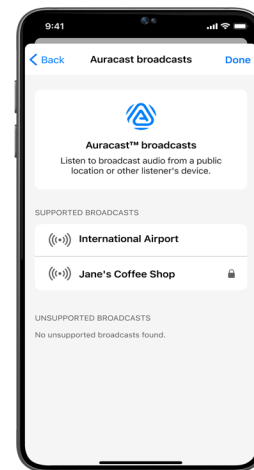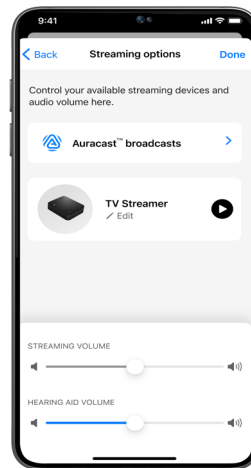

Znak słowny Auracast™ oraz powiązane logo są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Starkey odbywa się na podstawie udzielonej licencji. Logo Starkey, Starkey Edge oraz Omega są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc.

© 2026 Starkey Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. P00017538 9/26 CARD4162-00-PL-ST