

## QUICKTIP

## T2 Remote

L'application T2 Remote utilise des tonalités à très haute fréquence ou le téléphone DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) pour régler à distance le volume, changer de programme et activer/désactiver les aides auditives. L'application T2 comprend une procédure d'intégration pour déterminer quelles tonalités elle doit utiliser en fonction de la technologie non sans fil de l'aide auditive.

## Activer la commande T2 dans Pro Fit

T2 est activé par défaut sur les aides auditives filaires sans bouton-poussoir.

**Pour activer T2 sur les aides auditives filaires avec un bouton-poussoir :**

1. Lancez Pro Fit et connectez les appareils.
2. Sélectionnez **Contrôles utilisateur** dans le **menu déroulant**.
3. Sélectionnez la **case à cocher** pour activer T2. [Fig. 1]
4. Sélectionnez **Fichier > Imprimer > Guide de l'appareil** pour imprimer le guide du pavé de réglage à distance pour le patient, si souhaité.

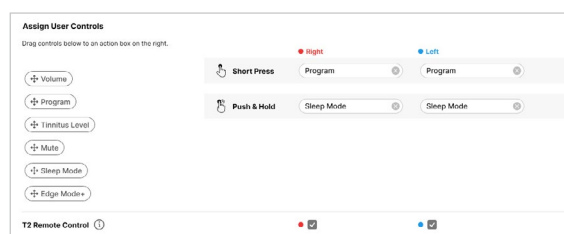


Figure 1

## Réglages de l'application T2 Remote

1. Sélectionnez l'icône de l'App Store sur l'appareil Apple ou l'icône du Google Play Store sur l'appareil Android. Recherchez l'application **T2 Remote** et suivez les instructions pour la télécharger.
2. Dans un environnement calme, ouvrez l'application **T2 Remote**.
3. Effectuez le réglage souhaité de l'aide auditive en appuyant sur les boutons Programme, Volume ou autres commandes. [Fig. 2]
4. Le smartphone émettra une tonalité. Le smartphone doit être tenu devant le visage afin de garantir que les aides auditives puissent capter la tonalité et effectuer le réglage. [Fig. 3]

**REMARQUE :** Si l'aide auditive n'a pas détecté le son, ajustez le **volume du haut-parleur du téléphone** et essayez à nouveau d'effectuer le réglage souhaité de l'aide auditive.

Le patient réglera le contrôle du volume sur son application ou utilisera les boutons latéraux de son téléphone pour régler le volume. Ensuite, en tenant le téléphone devant son visage, il appuiera sur « lire la tonalité » afin de s'assurer que les aides auditives peuvent capter la tonalité. Le patient suivra les instructions à l'écran pour identifier le type d'aide auditive.

**REMARQUE :** Ces modifications sont temporaires et les aides auditives reviendront aux paramètres par défaut lorsqu'elles seront éteintes/rallumées.

Les fonctionnalités peuvent varier selon le produit. Pour les réglages T2 Remote à l'aide d'un téléphone fixe, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.

L'application peut présenter de légères différences selon votre téléphone.

Pro Fit, T2 Remote et le logo Starkey sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple, Siri et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 9/26 FLYR4410-01-EN-ST

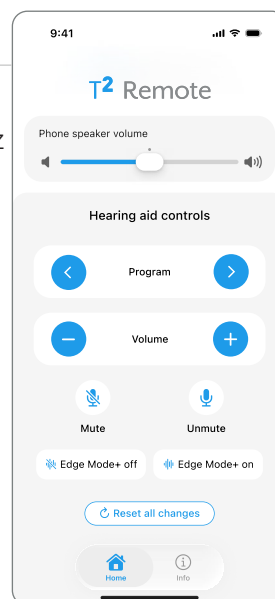


Figure 2

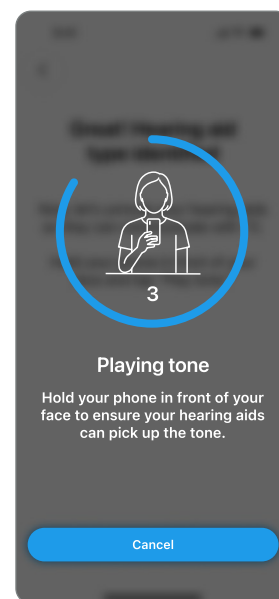


Figure 3