

L'assistant Auracast



Connectez-vous partout avec l'assistant Auracast™

Restez connecté où que vous soyez !
Recherchez facilement les diffusions
Auracast et rejoignez-les en quelques
instants, que vous soyez dans un aéroport,
une salle de sport ou à l'écoute d'annonces
publiques. Profitez d'un son clair diffusé
directement dans vos aides auditives
compatibles depuis l'application My Starkey.

OMEGA^{AI}
EDGE^{AI}



Où le trouver



Application mobile My Starkey*

*Nécessite la version 10.3.1.5 du micrologiciel des aides auditives
ou une version ultérieure.

Connexion aux diffusions Auracast depuis l'application mobile My Starkey

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Options de streaming** (🔊).
2. Sélectionnez **Diffusions Auracast™**.
3. Appuyez sur la diffusion que vous souhaitez rejoindre.
4. Profitez d'une diffusion audio fluide directement dans vos aides auditives Starkey compatibles.

*Scannez pour vérifier la
compatibilité de votre appareil*

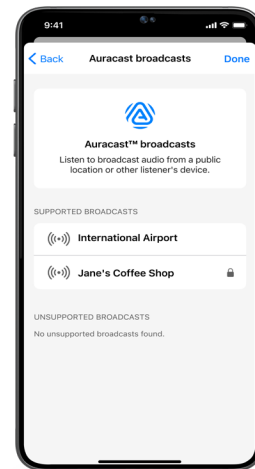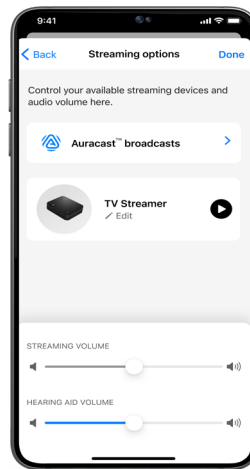

La marque verbale Auracast™ et les logos associés sont des marques déposées détenues par le Bluetooth SIG.

Toute utilisation de ces marques par Starkey est effectuée sous licence. Les marques Starkey, Edge AI et Omega sont des marques de Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 9/26 CARD4162-01-FR-ST