AUDIBEL

Adaptateur StarLink Edge LE

Connectez-vous **& profitez**


L'adaptateur StarLink Edge LE vous permet de connecter facilement des téléphones, tablettes et ordinateurs compatibles USB-C à vos aides auditives Audibel afin de profiter d'un streaming audio haute qualité en mains libres.

Compatible avec :

ARIS AI VITALITY AI


Information importante :

Les téléphones et tablettes équipés d'une prise audio 3,5 mm peuvent ne pas être compatibles avec l'adaptateur, en raison de leur configuration de routage audio.

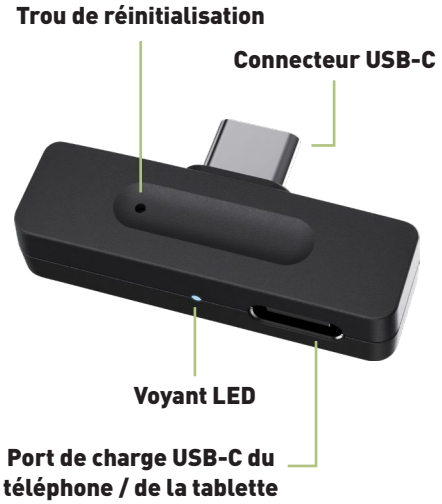


Appairage de votre adaptateur StarLink Edge LE

1. Connectez l'adaptateur à votre appareil

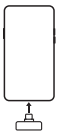

Branchez l'adaptateur sur votre appareil (téléphone, tablette ou ordinateur). Lors de sa première utilisation, l'adaptateur s'allume automatiquement et passe en mode d'appairage si aucun appareil n'a encore été associé.

2. Appairez vos aides auditives

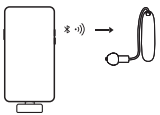


Lorsque l'adaptateur est en mode d'appairage, son voyant LED clignote en bleu. Éteignez puis rallumez vos aides auditives afin d'activer leur mode d'appairage. Une fois la connexion établie, le voyant LED de l'adaptateur reste allumé en bleu pendant 5 secondes, puis s'éteint.

Reconnexion : si la connexion est interrompue, débranchez puis rebranchez l'adaptateur.

Remarque : certaines commandes de vos aides auditives peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez l'adaptateur. Utilisez votre appareil connecté pour accepter ou terminer les appels.

AUTRES FONCTIONS

Chargement du téléphone /de la tablette pendant l'utilisation de l'adaptateur

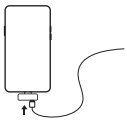

Branchez votre câble d'alimentation sur l'adaptateur afin de recharger votre téléphone ou votre tablette pendant son utilisation. Remarque : le transfert de données USB n'est pas disponible lorsque l'adaptateur est utilisé.


Réinitialisation et passage en mode d'appairage



À l'aide d'un objet fin et pointu, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en bleu. Cela indique que l'adaptateur est en mode d'appairage et prêt à être associé à un nouvel appareil.

Description du voyant LED

Voyant LED

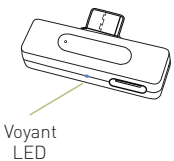

Appairage : clignotement bleu.

Appairé : voyant bleu fixe pendant 5 secondes, puis extinction.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 9/26 CARD4196-00-FR-AB
Audibel, le logo Audibel, Aris et StarLink sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.
Omega est une marque de Starkey Laboratories, Inc.