QUICKTIP

T2 Remote

Mit T2 Remote Control können Hörgeräte über Ultraschall- oder DTMF-Töne eines Telefons gesteuert werden. So lassen sich die Lautstärke ändern, Programme wechseln und die Hörgeräte stummschalten oder wieder aktivieren. Die T2-App führt durch die Einrichtung und hilft dabei, die zur drahtlosen Technologie der Hörgeräte passenden Töne auszuwählen.

T2 Remote Control in Pro Fit aktivieren

Bei nicht drahtlosen Im-Ohr-Hörgeräten ohne Drucktaste ist T2 standardmäßig aktiviert.

Um T2 bei nicht drahtlosen Hörgeräten mit Drucktaste zu aktivieren:

1. Starten Sie Pro Fit und verbinden Sie die Geräte.
2. Wählen Sie **Tastenoption** im **Flyout-Menü** ☰ aus.
3. Wählen Sie das **Kontrollkästchen** aus, um T2 zu aktivieren. *[Abb. 1]*
4. Wählen Sie **Datei** > **Drucken** > **Geräte Handbuch** aus, um bei Bedarf die Anleitung für das Fernbedienungsfeld zur Einstellung für den Kunden zu drucken.



Abbildung 1

T2 Remote App-Anpassungen

1. Wählen Sie auf einem Apple-Gerät das Symbol „App Store“ und auf einem Android-Gerät das Symbol „Google Play Store“ aus. Suchen Sie nach der **T2 Remote-App** und folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen.
2. In einer akustisch ruhigen Umgebung öffnen Sie die **T2 Remote-App.**
3. Nehmen Sie die gewünschte Anpassung des Hörgeräts vor, indem Sie auf die Schaltflächen für Programm, Lautstärke oder andere Bedienelemente tippen. *[Fig. 2]*
4. Das Smartphone gibt einen Ton aus. Das Smartphone sollte vor dem Gesicht gehalten werden, damit die Hörgeräte den Ton aufnehmen und die Anpassung vornehmen können. *[Fig. 3]*

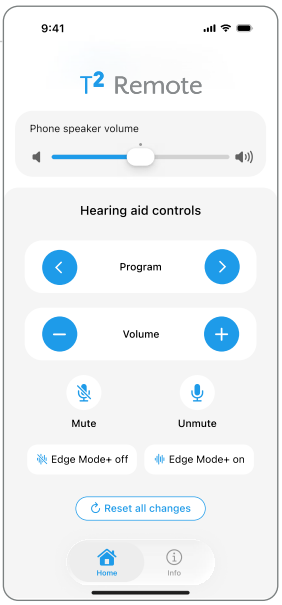


Abbildung 2

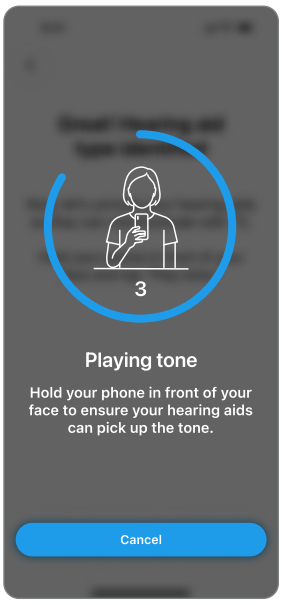


Abbildung 3

HINWEIS: *Falls das Hörgerät den Ton nicht erkannt hat, passen Sie die **Lautstärke des Telefonlautsprechers** an und versuchen Sie erneut, die gewünschte Einstellung am Hörgerät vorzunehmen.*

Der Kunde stellt die Lautstärke in seiner App ein oder verwendet die Seitentasten seines Telefons, um die Lautstärke festzulegen. Dann hält er das Telefon vor sein Gesicht und tippt auf „Ton abspielen“, um sicherzustellen, dass die Hörgeräte den Ton empfangen können. Der Patient folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Hörgerätetyp zu identifizieren.

HINWEIS: *Diese Änderungen sind vorübergehend, und die Hörgeräte kehren zu den Standardeinstellungen zurück, wenn sie aus- und wieder eingeschaltet werden.*

Funktionen können je nach Produkt variieren. Für T2 Remote-Anpassungen über ein Festnetztelefon lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Die App kann je nach Ihrem Telefon geringfügige Unterschiede aufweisen.
Pro Fit, T2 Remote und das Starkey-Logo sind Marken von Starkey Laboratories, Inc. Android und Google Play sind Marken von Google LLC.
Apple, Siri und App Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.
©2026 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 9/26 FLYR4410-01-DE-ST