# Appareils compatibles

Vérifiez si votre appareil mobile est compatible avec l'application My Audibel en scannant le code ci-dessous avec l'appareil photo de votre téléphone.

**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION :**

1. Ouvrez l'**App Store** sur les appareils Apple, ou **Google Play** sur les appareils Android.
2. Dans la barre de recherche, tapez **My Audibel**.
3. Cliquez sur **OBTENIR** sur les appareils Apple ou **INSTALLER** sur les appareils Android. L'application sera téléchargée sur votre appareil mobile.




Disponible sur Apple Store

Disponible sur Google Play

Pour connaître la liste des appareils compatibles, consultez le site : www.audibel.com/apps/my-audibel.

## En savoir plus sur l'application My Audibel

Consultez le site **www.audibel.com/apps/my-audibel** pour obtenir des instructions d'utilisation, des vidéos explicatives et plus d'informations sur les fonctionnalités.

AUDIBEL

www.Audibel.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344, États-Unis
1.800.769.2590

Cette application peut différer légèrement selon le modèle de votre téléphone. REMARQUE : Les téléphones d'un même modèle peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela peut avoir un impact sur la compatibilité dans certains pays.

Audibel, le logo Audibel, Aris, Audibel Vitality, Audibel A Series et Intrigue sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc. ©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Apple Watch®, Apple et App Store sont des marques déposées d'Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google Play et Android sont des marques déposées de Google, LLC.


©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 8/26 BROC3009-03-FR-AB

AUDIBEL

# My AUDIBEL

## Application mobile

**Aussi simple que possible.**
**Aussi performant que nécessaire.**

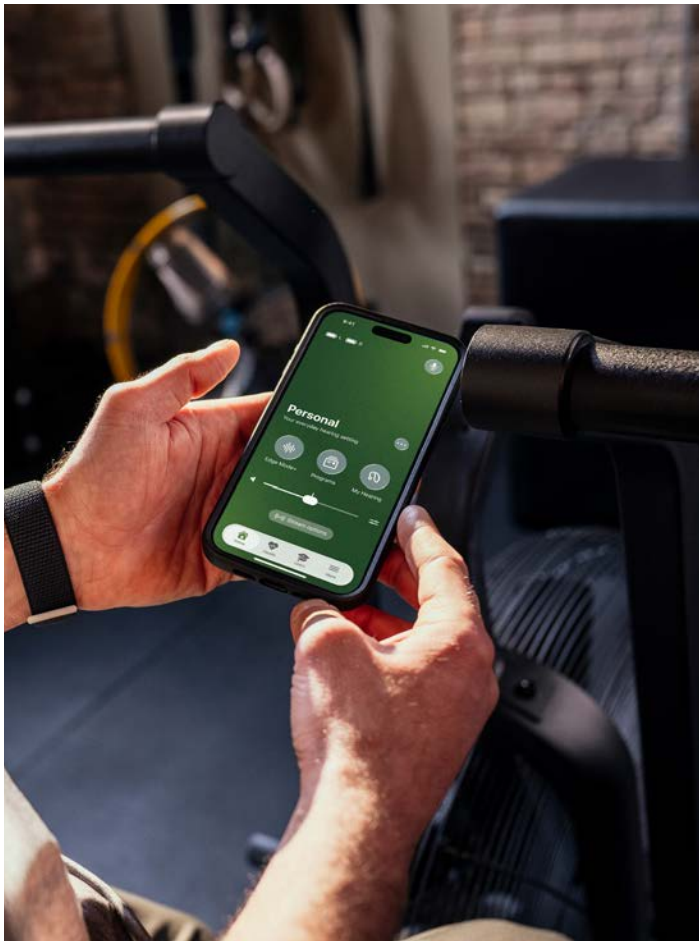




**Grâce à la technologie Bluetooth®, vos aides auditives sans fil Audibel se connectent à l'application compatible My Audibel.**

- **Mieux entendre, partout**
  Effectuez des ajustements instantanés pour améliorer la clarté de la parole et réduire le bruit, même dans les environnements les plus complexes.
- **Accès à des conseils, des outils et des ressources**
  Familiarisez-vous plus rapidement avec vos aides auditives grâce à des guides pratiques, des conseils et des tutoriels vidéo adaptés à chaque étape de votre parcours auditif.
- **Suivi santé et bien-être**
  Préservez votre santé en surveillant quotidiennement votre audition et votre activité physique. Fixez et atteignez vos objectifs en matière d'audition, de marche, d'exercice et bien plus encore.

**Prenez facilement le contrôle de votre parcours auditif. Et profitez pleinement de la vie avec My Audibel.**

*My Audibel est compatible avec les aides auditives sans fil Aris AI+, Vitality AI, A Series AI et Intrigue AI.*

## Connexion de vos aides auditives à un appareil Apple compatible

1. Sur votre appareil, assurez-vous que le **Bluetooth** est **ACTIVÉ**.
2. Sélectionnez **Paramètres > Accessibilité > Appareils auditifs**.
3. **ÉTEIGNEZ** puis **RALLUMEZ** vos aides auditives pour activer le mode de jumelage.
4. Vos aides auditives devraient apparaître sous **APPAREILS AUDITIFS MFI** (p. ex. **« Aides auditives de Jane »**). Sélectionnez-les.
5. Sélectionnez **Jumeler** pour chaque aide auditive (**DROITE** et **GAUCHE**). Le jumelage est terminé.
6. Ouvrez **l'application My Audibel**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte et connecter vos aides auditives.




**Changez de programme et ajustez le volume rapidement et facilement sur votre montre Apple Watch compatible.**

Consultez la **section Apprendre** de l'application My Audibel pour savoir comment l'installer sur votre Apple Watch.

## Connexion de vos aides auditives à un appareil Android compatible

1. Touchez **l'icône Paramètres** de votre appareil.
2. Sur votre appareil, assurez-vous que le **Bluetooth** est **ACTIVÉ**.
3. **ÉTEIGNEZ** puis **RALLUMEZ** vos aides auditives pour activer le mode de jumelage.
4. Ouvrez **l'application My Audibel**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte et connecter vos aides auditives.
5. Lorsque vos aides auditives apparaissent à l'écran, cochez les cases correspondantes (**DROITE** et **GAUCHE**). Sélectionnez **CONNECTER**. Le jumelage est terminé.

